

UROMED URINE BAG

UROMED CYSTOBAG® MINI 750

Tootekood: REF 4891 Kirjeldus: UROMED CYSTOBAG MINI uriinikott jalale 750ml.

Kasutamise definitsioon: uriinikott, eraldunud uriini kogumiseks.

Säilitamine: hoida jahedas (5-35 °C) ja kuivas kohas (niiskus 20%-80%), mustuse ja valguse eest kaitstud.

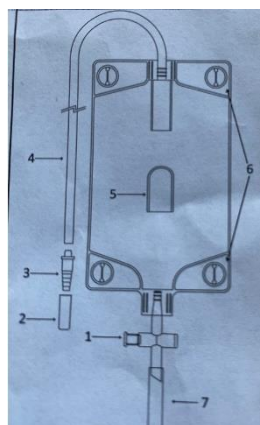
Näidustus: uriini kogumiseks, ka meeste väliste kateetrite puhul.

Vastunäidustus: kui kasutate püsikateetrit, arvestage, et vastunäidustused on kohaldatud ka toodetele koos uriinikottidega.

Võimalikud komplikatsioonid: leke kotil või voolikul. Koti katki minemine. Uriini äravoolu obstruktsioon. Ebameeldiva lõhna esinemine.

Informatsioon:

- Toode on mitte-steriilne, seda ei tohi ühendada püsikateetriga või teiste steriilsete toodetega.
- Toodet kasutada ainult selleks ette nähtud eesmärgil.
- Toode on ühekordseks kasutamiseks, ära taaskasuta, et vältida infektsiooni teket ja võimalikke tekkivaid toote kvaliteedi defekte.
- Saastunud toode on ohtlik patsiendile.
- Garantii antakse ainult tingimusel, et seda on kasutatud vastavalt ettenähtud korrale ja näidustusel.
- Patsient peab olema juhendatud tootega kasutamisest.
- Uriinikotti tuleb vahetada ja kontrollida regulaarselt.
- Toode ja pakend on lateksivabad
- Toode sisaldab DEHP.

Tehniline informatsioon:

- 1- T-kraan,
- 2- konnektori kate,
- 3- konnektor,
- 4- sisselaskevoolik,
- 5- T-kraani port,
- 6- kinnituskohad takjapaeltele,
- 7- ühenduslüli öökoti kasutamiseks.

Paigaldamine

Kasutajad: arstid, väljaõppe saanud õed või patsiendid/sugulased.

Uriinikoti paigaldamine: -Kontrolli, et toode ei oleks kahjustada saanud -Kontrolli, et T-kraan oleks suletud - Eemalda sinine kaitsekork ja ühenda see kindlalt kateetriga -Kinnita uriinikott jalale, kui kasutad selleks takjakinnitusi, tõmba need kotil olevast avast läbi ja fikseeri kott jalale. Takjakinnitusi võib ka kääridega lühemaks lõigata.

Uriinikoti tühjendamine:

-Võta pordist välja T-väljalaskeava, lase vertikaalselt rippu, -Ava T-kraan ja tühjenda kott tualetis või anumasse, veendu, et kraan ei puutuks nendega kokku, -Sulge kraan ja pane see tagasi T-kraani porti, ära jäta seda rippuma.

Kasutusjuhend:

- Pese ja desinfitseeri käed enne uriinikoti ühendamist või tühjendamist, soovitatav on kasutada ühekordseid kummikindaid.
- Välgi uriinikoti vooliku painutamist, tõmbamist või sikutamist.
- Voodihaigel paitsiendil tuleb jälgida, et voolik oleks asetatud reie pealt, tuleb vältida, et voolik satuks reie alla.
- Uriinikoti kontakt põrandaga peab olema välditud, et ennetada infektsiooni riski.
- Ära tõmba, skikuta, survesta koti erinevaid osi.
- Tühjenda uriinikott natuke enne või maksimaalse skaala täituvuse juures, vastasel juhul voolab uriin tagasi kateetri, mis on ohuks infektsiooni tekkele.
- Kindlustamaks pidev uriini väljavool, tuleb uriinikott kinnitada jalale, voodile, ratastoolie, positsioonis, et ta oleks allpool põit.
- Uriinikott peab alati olema vertikaalses asendis, et ennetada uriini tagasivoolu.
- Uriinikotil on silikoonist ühendusülili, mille saab ühendada teise uriinikotiga, näiteks suurema kotiga, öiseks kasutamiseks.
- Eemalda ja sisesta T-kraan ettevaatlikult T-kraani porti, väldi selle kahjustamist.

Uriinikoti eemaldamine:

Enne uriinikoti eemaldamist desinfitseeri ühenduskohad, ühenda lahti uriinikott, seejärel tühjenda uriinikott alt T-kraaniga, lükates kraan lõpuni välja.

Vastavalt arsti juhiste, tuleb uriinikotti vahetada regulaarselt, mitte hiljem kui iga 3 päeva tagant.

Hävitamine:

Toode tuleb hävitada kui bioloogiliselt ohtlik jääde peale kasutamist, vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Tootja: UROMED Kurt Drews KG Meessen 7/11, 22113 Oststeinbek, Saksamaa